

Nya

# TS-150

## Rätt ljud från TV:n till din hörapparat

En slingförstärkare för hemmet och lokaler upp till 150 m<sup>2</sup>. Ger perfekt TV-ljud i hörapparaten för alla som befinner sig i rummet.

**NYHET!** Nu med Time Delay - för perfekt synkronisering av ljud/bild för plattskärmar

### Passar alla hörapparater med telespole

TS-150 passar alla som använder hörapparat med telespole och vill höra TV:n eller stereon utan att störas av andra ljud.

### Fungerar med digitalbox

Om TV:n är ansluten till digitalbox, DVD-spelare, video etc, känner den automatiska omkopplingsfunktionen av vilken enhet som valts och ger rätt ljud i hörapparaten.

### Automatisk volymkontroll

TS-150 behöver bara ställas in en gång. Därefter håller den automatiska volymkontrollen (AGC) ljudet till hörapparaten konstant, även om volymen på TV:n ändras. Alla blir nöjda!

### Perfekt ljud i hela rummet

TS-150 ger perfekt ljud oavsett var man befinner sig i rummet. TS-150 kan driva en teleslinga på upp till 150 m<sup>2</sup>. Passar utmärkt i hemmet eller t.ex. samlingslokaler.




### Ljudsynkronisering för plattskärmar - "Time Delay"

I vissa TV-apparater med LCD- och Plasma-skärm är det en liten fördröjning av bilden jämfört med ljudet. Detta åtgärdas med hjälp av ett vred där ljudfördröjningen kan justeras, så att ljud och bild blir perfekt synkroniserat. För äldre TV-apparater, kan funktionen stängas av helt.

### Flera kan lyssna samtidigt

Med en teleslinga blir det bara rummets storlek som begränsar hur många hörapparatbärare som kan lyssna samtidigt. TS-150 har även ingångar för mikrofon och PA-system.

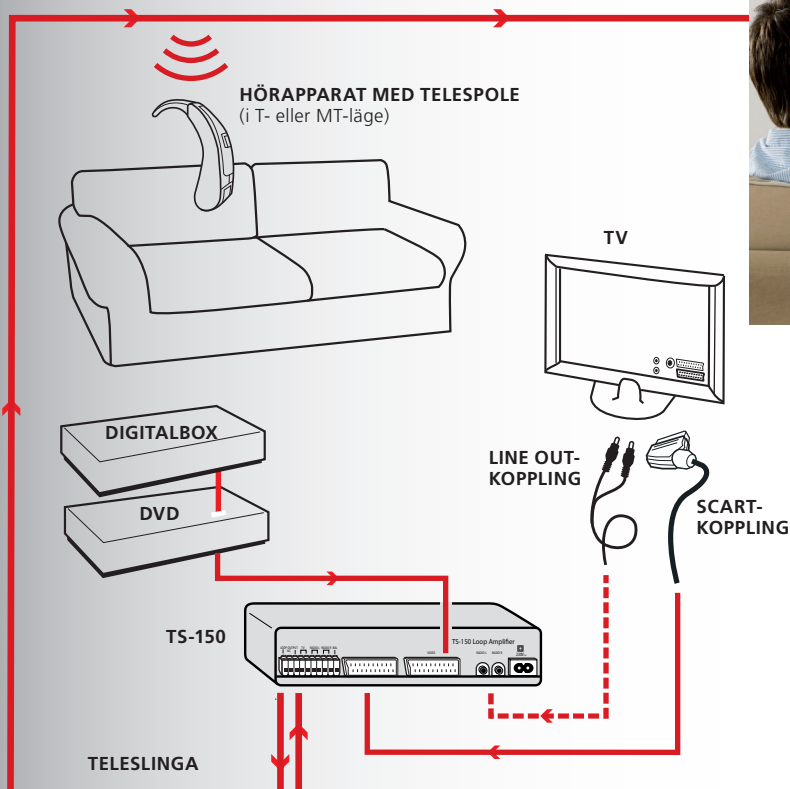

ReSound

rediscover hearing

## TS-150 passar till:

- TV-apparater med scart-kontakt (scart-koppling, se illustration på andra sidan).
- LCD/Plasma-TV (line out-koppling, se illustration på andra sidan).
- Stereo, radio, MP3-spelare etc.

## Inkoppling:

- Lägg ut en teleslinga i TV-rummet och koppla den till TS-150.
- Koppla in TS-150 mellan TV:n och videon (övriga enheter kopplas in i serie).
- Justera innivån tills en gul lampa tänds.
- Justera utnivån tills en röd lampa tänds.
- Utifrån behov, justera tidsfördröjning (Time delay) vid provlyssning.
- Klart, du behöver inte röra TS-150 mer!

## Artikelnummer

**TS-150 Time Delay slingförstärkare, EU**      **200 10 23**

### Ingår i TS-150, 200 10 23:

TS-150 slingförstärkare  
Scartkabel  
Nätkabel  
Skruvar, plugg och skruvmejsel  
Mikrofonadapter

## Tekniska data

### TS-150 slingförstärkare

Driftspänning:	230V AC 50-60 Hz
Slingarea:	Enl. IEC60118-4 upp till 150 m <sup>2</sup>
Frekvensområde:	Enl. IEC60118-4 100-5000 Hz ±3dB
Distorsion:	<1%
Fördröjning:	Ställbar: off, 30-500 ms
Insvängningstid:	>125 ms
Utsvängningstid:	Snabb 5 s / långsam 30 s (dip-switch)
Vikt:	1,7 kg
Mått (B x D x H):	250 x 140 x 55 mm
Egenskaper:	AGC: Långsam, snabb och avstängd Ton: Justerbar diskant
Ingångar:	TV, video, radio, balanserad och mikrofon

### Teleslinga

Resistans: 0,5 – 1 Ohm

## ANSVARIG TILLVERKARE

enligt EU:s medicintekniska  
direktiv 93/42/EEC:

### GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark



För frågor rörande EU:s  
medicinska direktiv 93/42/EEC  
hänvisas till:

GN ReSound A/S

För service och produkt-  
relaterade frågor kontakta:

GN ReSound AB

9950083 Issue 2, 2010-02    Vi reserverar oss för ändringar i utförande och specifikation utan föregående meddelande.

[www.gnresound-ald.se](http://www.gnresound-ald.se)

GN ReSound AB ALD Division  
Box 12874  
112 98 STOCKHOLM

Tel. 08-441 16 70  
Fax 08-441 16 80  
info.ald@gnresound.se

ReSound

rediscover hearing