

# Lydforsterkeren Mini



Gir riktig lyd fra TV-en til høreapparatet ditt



# Mer enn bare høyt volum

Når du ser på TV, vil du kunne høre bra uten å skru opp volumet unødige. Løsningen heter Mini, en personlig lydforsterker som passer alle som bruker høreapparat med telespole. Med Mini får du alltid riktig lydstyrke uten forstyrrende bakgrunnslyd, uansett hva slags volum familien din og vennene dine foretrekker.

## Riktig lyd til riktig bilde – selv med digitalboks

Med Mini får du riktig lyd til riktig bilde. Den kobles automatisk om når du skifter mellom for eksempel DVD-spiller og video. Selv med digitalboks fungerer den uten problemer. Mini detekterer hvilken enhet du har valgt og bytter lydkilde samtidig som TV-en endrer bildekilde. TV-tittingen blir bekvem og fri for forstyrrelser.

## Fleksibel og funksjonell

Uansett hvilke innkoblingsmuligheter som finnes på TV-en din, vil den fungere. Du får god lydforsterking uansett hvilken TV du ser på.

## Skreddersydd lydkontroll

Du behøver vanligvis bare stille inn volumet på Mini én gang når du installerer. Deretter holder den automatiske volumkontrollen (AGC) lydnivået konstant, selv om volumet på TV-en endres.

## Stolslynge

Lydforsterkeren Mini kobler du inn mellom TV-en og stolslyngen. TV-lyden overføres så fra stolslyngen direkte til høreapparatet ved hjelp av telespolen.

Stolslynge og tilbehør for de tre innkoblingsalternativene følger med i pakken. Du kan også lytte via en halslynge med separat volumkontroll (følger ikke med). Uansett hvilket alternativ du velger, får du alltid en behaglig og naturlig lydopplevelse.

## Bekvem å ta med

Mini er liten og hendig å ta med på reise eller på hytta. Du kobler den enkelt til det TV-apparatet du vil se på. Du kan velge ditt eget TV-volum overalt, uten å forstyrres av eller forstyrre noen andre.




3.

## Annen løsning for riktig TV-lyd

Mini fungerer med alle TV-apparater. Den kan ta opp lyden fra TV-apparatet ditt på tre ulike måter:

1. Via TV-ens Line Out-uttak
2. Via TV-ens scartuttak
3. Via mikrofon som festes på TV-høytaleren

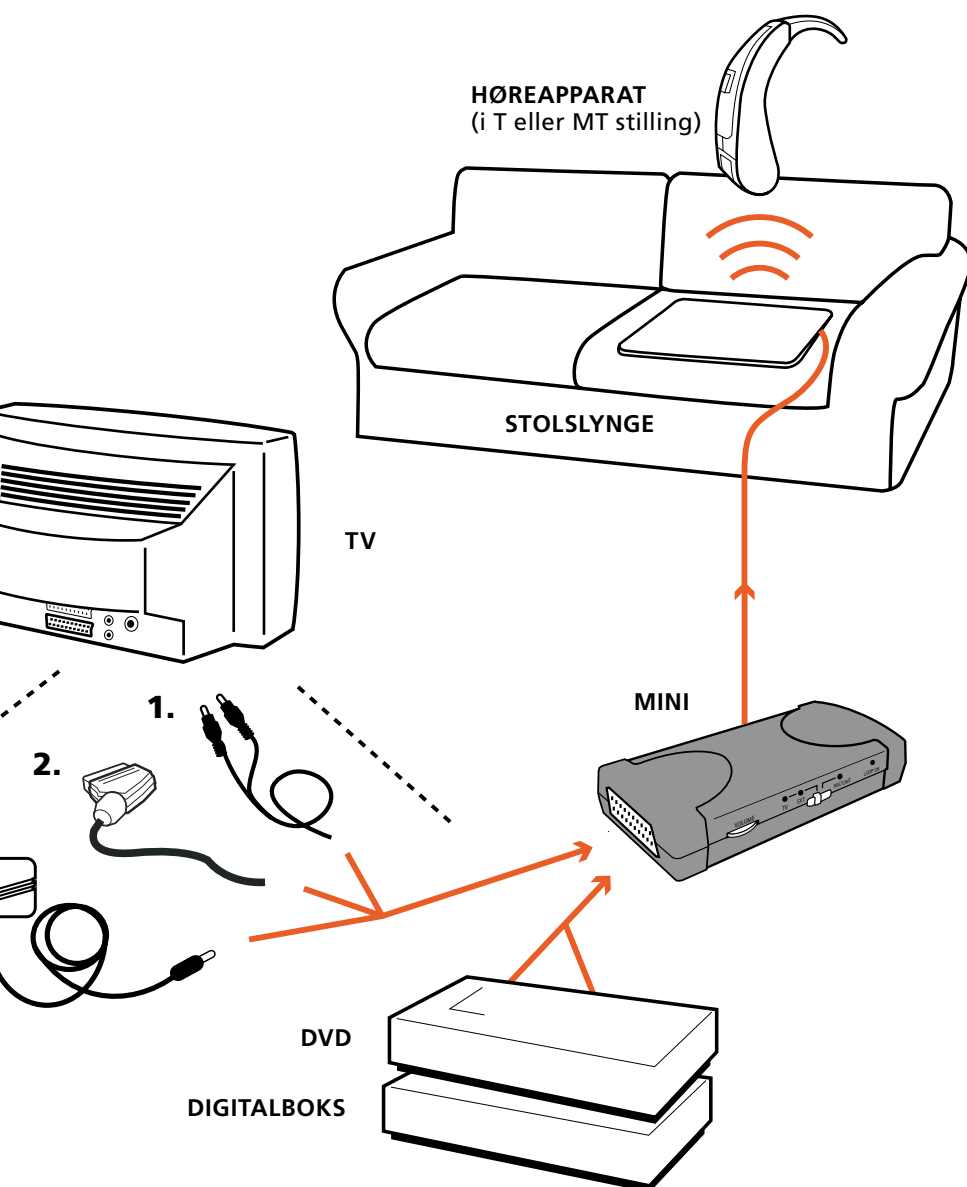

### TS-150

Kraftigere slyngeforsterker enn Mini, med samme automatiske lydombindingsfunksjon. Utmerket for bruk hjemme eller i mindre lokaler (maks. 150 m<sup>2</sup>). I stedet for stolslynge installeres en slynge i rommet, slik at høreapparatet kan ta opp lyden overalt.

## Varenummer

**Stolslynge komplett** 200 21 81

### **Inngår i Stolslynge komplett:**

Mini m/Scart 200 10 32  
 Batterieliminatør 200 10 37  
 Kabel RCA 3,5 mm kontakt, 1,5 m 200 10 33  
 Scartkabel 200 10 39  
 Mikrofon FXT 3,5 mm kontakt, 4 m 200 60 13  
 Stolslynge 200 20 45

### **Ekstra tilbehør:**

Halslynge med volumkontroll 414 01 60  
 Tilkoblingsledning for halslynge 200 20 26

**TS-150, loop amplifier, EU** 200 10 23

## Tekniske data

### **Lydforsterker Mini**

Innsignal: 50 mV-12 V  
 Utgangsbelastning: 4 ohm  
 Uteffekt: 6 W ved 4 ohm  
 Innsvingningstid: 50 ms  
 Utsvingningstid: 35 s  
 Frekvensomfang: 100 Hz-8 kHz, -3 dB rel. 1 kHz  
 Forvrengning: <1%  
 Signal/støy-forhold: >40dB A-veid  
 Vekt: 150 g (uten nettadapter)  
 Mål: 145 x 70 x 30 mm  
 (med feste ca. 38 mm)

### **Ekstern nettadapter**

Pluggadapter, primær 230VAC 50Hz, sekundær 12VAC 15VA

### **Stolslynge**

Motstand: 4 ohm  
 Dimensjoner: 43 x 43 x 2 cm



Spørsmål knyttet til EUs direktiv for medisinsk utstyr 93/42/EEC bør rettes til GN ReSound A/S.

## ANSVARLIG PRODUSENT

*i henhold til EUs direktiv for medisinsk utstyr 93/42/EEC:*

### **GN ReSound A/S**

Lautrupbjerg 7  
 DK-2750 Ballerup  
 Danmark

*For service og produktrelaterte spørsmål, kontakt GN ReSound AS i Norge.*

## KONTAKT

### **GN ReSound AS**

Akersgaten 45

Postboks 132 Sentrum  
 0102 Oslo

Telefon: 22 47 75 30  
 Telefaks: 22 47 75 50  
 info@gnresound.no

**www.gnresound.no**