

Nya

AutoMini

Rätt ljud från TV:n till din hörapparat



När du tittar på TV vill du kunna höra bra utan att höja volymen i onödan. Lösningen heter AutoMini, en personlig ljudförstärkare som passar alla som använder hörapparat med telespole. Med AutoMini får du alltid rätt ljudstyrka, utan störande bakgrundsljud, oavsett vilken volym din familj och dina vänner föredrar.

NYHET! Nu med Time Delay - för perfekt synkronisering av ljud/bild för plattskärmar



ReSound

rediscover hearing

AutoMini - Istället för hög volym

Rätt ljud till rätt bild – även med digitalbox

Med AutoMini får du rätt ljud till rätt bild. AutoMini kopplar automatiskt om när du växlar mellan till exempel DVD-spelare och video. Även med digitalbox fungerar autokopplingen utan problem. AutoMini känner av vilken enhet du har valt och byter ljudkälla samtidigt som TV:n ändrar bildkälla. Ditt TV-tittande blir bekvämt och störningsfritt.

Flexibel och funktionell

Oavsett vilka inkopplingsmöjligheter som finns på din TV, kommer den att fungera med AutoMini. Du får god ljudförstärkning vilken TV du än tittar på.

Ljudsynkronisering för plattskärmar - "Time Delay"

I vissa TV-apparater av typ LCD och PLASMA är det en liten fördröjning av bilden jämfört med ljudet. Detta åtgärdas med hjälp av ett vred där ljudfördröjningen kan justeras, så att ljud och bild blir perfekt synkroniserat. För äldre TV-apparater, kan funktionen stängas av helt.

Skräddarsydd ljudkontroll

Du behöver vanligtvis bara ställa in volymen på AutoMini en gång när du installerar. Därefter håller den automatiska volymkontrollen (AGC) ljudnivån konstant, även om volymen på TV:n ändras.

Enkel att koppla in

AutoMini kopplar du in mellan din TV och stolslingan. TV-ljudet överförs sedan från stolslingan direkt till din hörapparat med hjälp av telespolen.

Stolslingan och tillbehör för två inkopplingsalternativ medföljer AutoMini. Du kan även lyssna via en halsslinga (beställs separat). Vilket alternativ du än väljer, får du alltid en behaglig och naturlig ljudupplevelse.

Bekväm att ta med

AutoMini är liten och behändig att ta med på resan eller till sommarstugan. Du kopplar den enkelt till den TV-apparat du vill titta på. Du kan välja din egen TV-volym överallt, utan att störas av eller störa någon annan.




AutoMini visas här i naturlig storlek



AutoMini fungerar med alla TV-apparater. Den kan ta upp ljudet från din TV-apparat på tre olika sätt:

1. Via TV:ns Line Out-uttag
2. Via TV:ns scartuttag
3. Via mikrofon (beställs separat) som fästs på TV-högtalaren

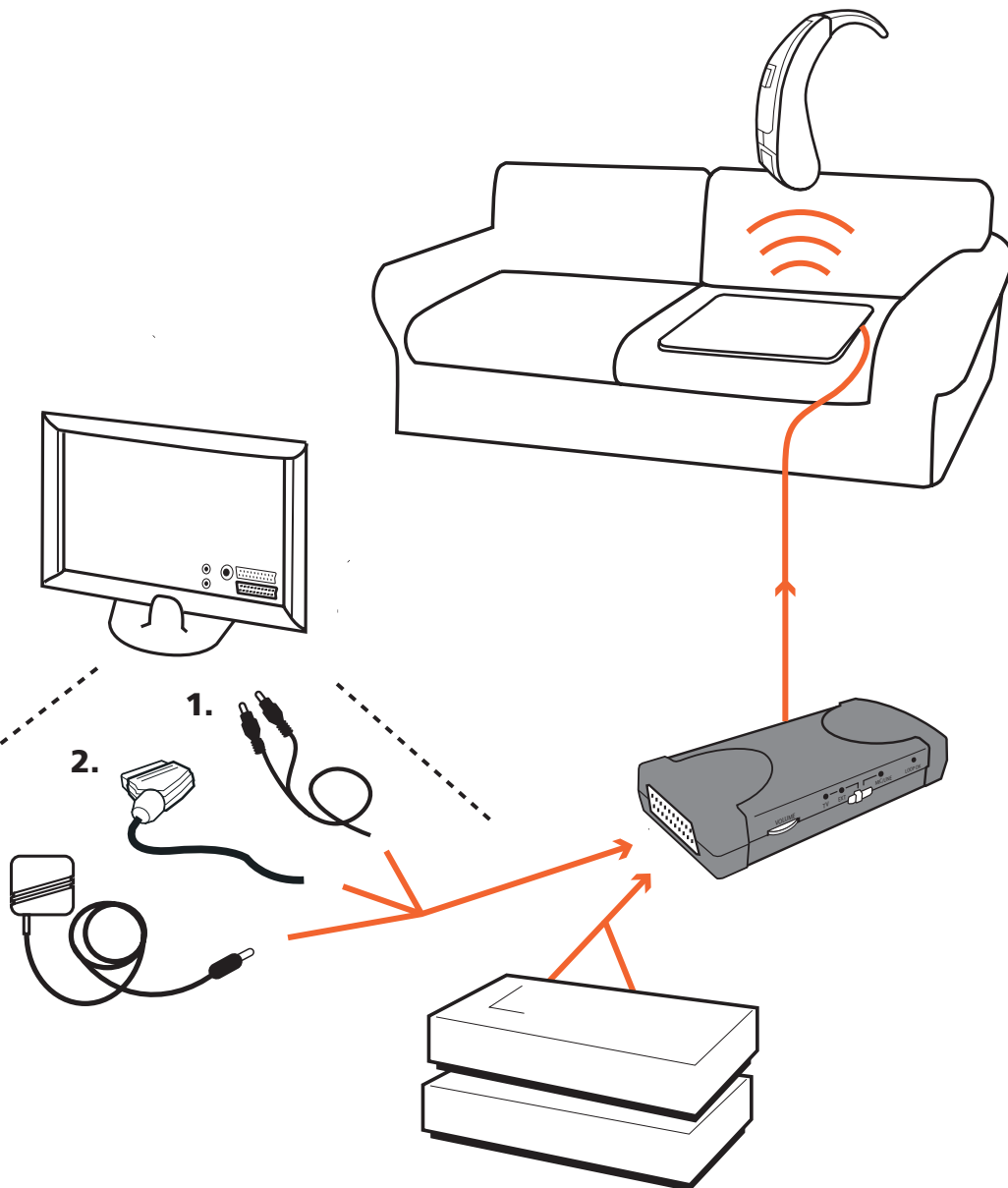

Alternativ lösning för rätt TV-ljud



TS-150

Kraftigare slingförstärkare än AutoMini, med samma automatiska ljudomkopplingsfunktion. Utmärkt för hemmet eller mindre lokaler (max 150 m²). Istället för stolslinga installeras en slinga i rummet så att hörapparaten kan plocka upp ljudet överallt.

Artikelnummer

AutoMini Time Delay set, EU 200 21 82

Ingår i AutoMini Time Delay set, EU:

AutoMini	200 10 32
Nätadapter	200 10 37
Kabel RCA 3,5 mm jack, 1,5 m	200 10 33
Scartkabel	200 10 39
Stolslinga	200 20 45
DIN-kontakt	163 373 00

Extra tillbehör:

Halsslinga med volymkontroll	414 01 60
Anslutningsladd för halsslingan	200 20 26
Mikrofon FXT 3,5 mm jack, 4 m	200 60 13
Adapter för två mikrofoner	200 90 01

TS-150, slingförstärkare, EU 200 10 23

Tekniska data

AutoMini förstärkare

Insignal:	50mV-12V
Utgångsbelastning:	4 Ohm
Uteffekt:	6 W vid 4 Ohm
Insvängningstid:	50 ms
Utsvängningstid:	35 s
Frekvensomfång:	100 Hz-8 kHz, -3 dB rel. 1 kHz
Distorsion:	<1%
Signal/brusförhållande:	>40 dB A-vägt
Fördröjning av ljud:	Off samt 50-180 ms
Vikt:	150 g (utan nätadapter)
Mått:	145 x 70 x 30 mm (med uppfästning ca 38 mm)

Extern nätadapter

Pluginadapter, primär 230VAC 50Hz, sekundär 12VAC 15VA

Stolslingan

Resistans:	4 Ohm
Mått:	43 x 43 x 2 cm

9950076 Issue 2, 2010-02 Vi reserverar oss för ändringar i utförande och specifikation utan föregående meddelande.

ANSVARIG TILLVERKARE

enligt EU:s medicintekniska
direktiv 93/42/EEC:

GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark



För frågor rörande EU:s
medicinska direktiv 93/42/EEC
hänvisas till:

GN ReSound A/S

För service och produkt-
relaterade frågor kontakta:

GN ReSound AB

www.gnresound-ald.se

GN ReSound AB ALD Division
Box 12874
112 98 STOCKHOLM

Tel. 08-441 16 70
Fax 08-441 16 80
info.ald@gnresound.se

ReSound

rediscover hearing