

t-hook

En bärbar handsfree för
hörapparat användare

Handsfree för hörapparatbärare

T-hook är en lätt och bekväm handsfree för hörapparatbärare som använder mobiltelefoner eller trådlösa telefoner.

T-hook kan användas både till allt-i-örat och bakom-örat hörapparater. Designen gör den lätt att placera bakom örat och den sitter säkert och bekvämt på plats. Ljudet fångas upp när hörapparaten är i T-läge.

Med T-hook får man en utmärkt ljudkvalitet. T-hook är mycket enkel att använda och har hängande inbyggd mikrofon i sladden.




Passar till de flesta mobila och trådlösa telefoner

T-hook har en 2,5 mm kontakt som passar via adapter till de flesta mobiltelefoner och trådlösa telefoner på marknaden. För mer information om adapterar, se GN ReSounds hemsida.


Vissa mobiltelefoner och trådlösa telefoner är utrustade med ett 2,5 mm uttag och behöver då ingen adapter.




ATT ANVÄNDA T-HOOK

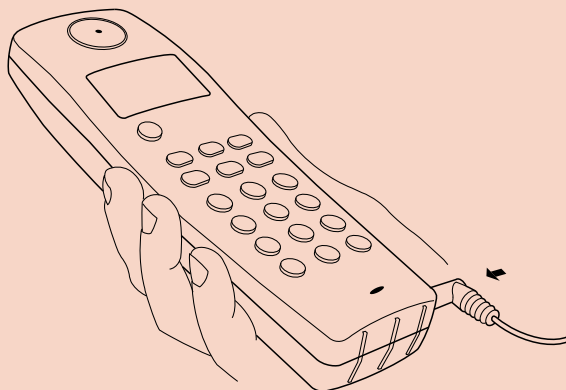

Direkt inkoppling till telefonen.

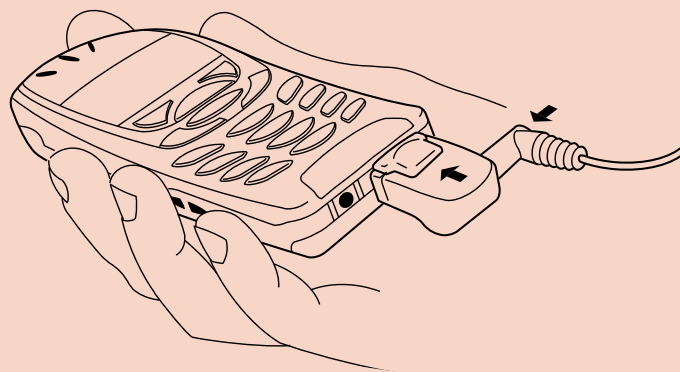

Inkoppling via en adapter.

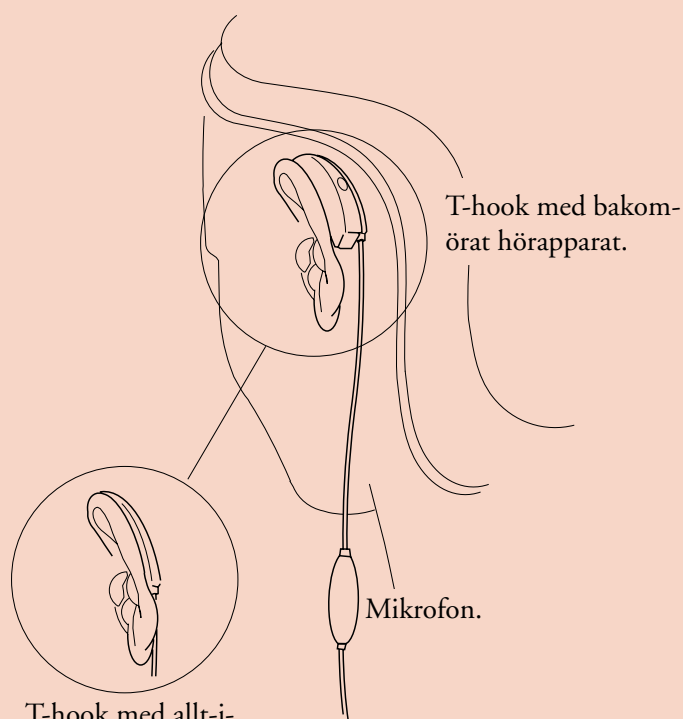

T-hook med bakom-örat hörapparat.

Mikrofon.


T-hook med allt-i-örat hörapparat.

Tekniska data

Impedans:	177 Ohm.
Resistans:	175 Ohm.
Induktans:	4,4 mH.
Gränsfrekvens, -3 dB:	6 kHz.
Känslighet:	0,6 V in ger en fältstyrka på 100 mA/m på ett avstånd av 5 cm.

CE Frågor rörande EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC hänvisas till GN ReSound A/S.

Artikelnummer "T-hook Universal 2,5 mm": 200 21 37

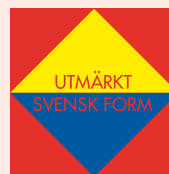

T-hook har belönats med utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form".

KONTAKT

GN ReSound AB
 Box 128 74
 112 98 Stockholm
 Tel. vxl. 031-800 150
 Fax 08-54 55 36 39
 info.ald@gnresound.se
 www.gnresound-ald.se

ANSVARIG TILLVERKARE

enligt EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC:

GN Resound A/S
 Lautrupbjerg 7
 DK-2750 Ballerup
 Danmark

För service och produktrelaterade frågor: kontakta GN ReSound AB.